

## PROYECTORES COMPATIBLES



CS POLA 600



CS 550



CP 550

APH  
550



## FORÓPTERO AUTOMÁTICO PARA LA REFRACCIÓN MÁS ACTUAL

## ESPECIFICACIONES

ALCANCE DE MEDICIONES		LENTE AUXILIAR	
Distancia pupilar	48 mm ~ 80 mm	Filtro rojo/verde	•
Esfera	-28,75 ~ 27,25D (0,12D, 0,25D, 0,50D y 1,00D)	Filtro polarizado	•
Cilindro	-6,00D ~ + 6,00D (0,25D, 1,00D)	Prisma	6 Δ / 10 Δ
Eje	0° ~ 180° (1° / 5°)	Maddox rojo (horiz./vertic.)	Rojo
Prisma	0 ~ 20 Δ (0,1 Δ / 0,5 Δ / 1,0 Δ)	Lente para retinoscopia	•
		Cilindro cruzado (±0,50D)	•
CONVERGENCIA (NV)		Agujero estenopeico	•
	•	Oclusores	•
DISTANCIA AL VÉRTICE		Cilindro cruzado de Jackson	±0,25D / ±0,50D
	12/13,75/16/18 mm		
TECLADO		DIMENSIONES Y PESO	
Pantalla	Pantalla táctil de 10,4 pulgadas	Cabezal	417 (L) (máx.) x 112 (P) x 308 (H) mm - 5,3 kg
Impresora integrada	•	Mando	272 (L) x 272 (P) x 204 (H) mm - 2,5 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN		Fuente de alimentación	326 (L) (máx.) x 119 (P) x 83 (H) mm - 2,4 kg
	AC100 a 240V,50/60Hz		

CE Marcado de conformidad

Las presentes especificaciones e imágenes no son vinculantes contractualmente y podrán modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

### FUNCIONES



APH 550

FORÓPTERO AUTOMÁTICO



Essilor Instrumentos  
C/ Labastida s/n  
28034 Madrid  
Tel.: 902 222 345  
Essilor.es/instrumentos  
infoinstrumentos@essilor.es

Información de contacto



pola




Optometría



# FORÓPTERO AUTOMÁTICO PARA LA REFRACCIÓN MÁS ACTUAL

El APH550 es un foróptero automático de alta gama que ofrece velocidad y comodidad en todo tipo de pruebas. Gracias a su teclado de uso intuitivo y a las posibilidades de interconexión, es la herramienta ideal para perfeccionar la cadena de refracción.

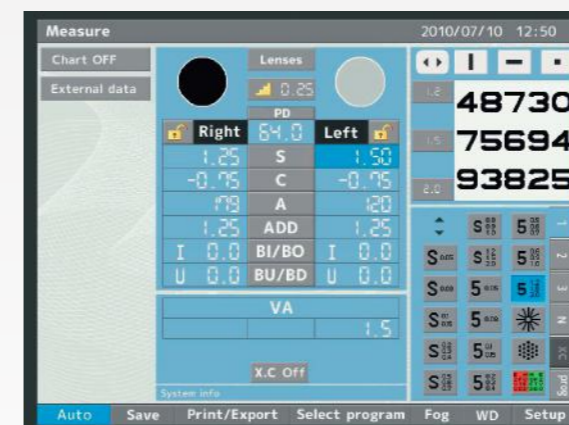

## UN FLUJO DE TRABAJO MÁS REGULAR

- Transferencia de datos sencilla desde el AKR o un frontofocómetro para coordinar el flujo de los datos de refracción.
- Una pantalla centralizada para controlar el foróptero y las pruebas de visión en un flujo de trabajo regular.
- Funciones automáticas y protocolos que pueden personalizarse para optimizar sus necesidades personales en las pruebas.
- Guarde y compare prescripciones con tan solo un par de clics.


## UNA EXPERIENCIA MEJOR PARA EL PACIENTE

- Una comodidad óptima para el paciente gracias a la función silenciosa del foróptero.
- La rotación a alta velocidad del disco garantiza un movimiento suave.
- Comenzar la refracción tan cerca de la prescripción final, hace que la prueba sea más breve y menos tediosa para el paciente.

## TECLADO MUY INTUITIVO

- Amplia pantalla táctil de 10 pulgadas que proporciona la misma ergonomía visual que una *tablet*.
- Aprendizaje muy rápido gracias a una interfaz que resulta intuitiva y fácil de usar.
- Dial central que permite un ajuste rápido de la esfera, el cilindro y el eje con una sola mano.
- Diseño compacto con pantalla reclinable.

## CADENA DE REFRACCIÓN AUTOMÁTICA

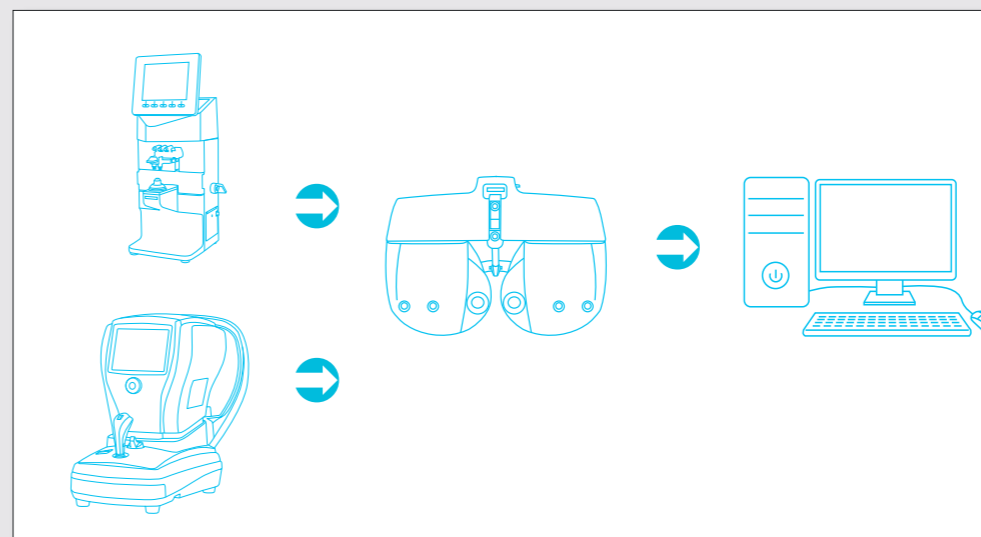

Para facilitar y acelerar el proceso de análisis, el sistema puede retener datos de un AKR o un frontofocómetro(1). Al final de la refracción, el APH 550 también puede transferir los resultados de la refracción al Sistema de Gestión del Paciente (PMS)(1).

(1) Compruebe la compatibilidad de los dispositivos con el fabricante.